

GENTLE TOUCH MELLSZÍVÓ



Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA MEG!

EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, A TERMÉKEKRE

VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT, ÉS A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ TARTALMAZZA.

Gratulálunk a Cangaroo elektromos mellszívó megvásárlásához. Különböző mértékben szabályozza a pumpáló erőt, egy szelepet az enyhe mellszíváshoz és egy lágy masszázsfúvókát.

Az elektromos mellszívót az EN 55014-1; 2 és EN 61000-3-2; 3-3. szabványoknak megfelelően tesztelték és megfelelnek;

Számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyeket a dinamikus anyák szeretnek, és számos okból tökéletes:

- Az anyatej kifejtése és tárolása, amikor távol van a csecsemőjétől, például munka közben.

- Enyhítse a mell feszültségét a túl sok anyatej miatt. Például olyan esetekben, amikor gyermeke étkezési szokásai megváltoznak a szilárd ételek fogyasztása miatt.

- A tejellátás fenntartása, ha ideiglenesen le kell állítania a szoptatást. Például expressz tejet, amely nem megfelelő gyógyszeres kezelés alatt.

A Cangaroo elektromos mellszívó jellemzői:

1. Masszázs-ciklus vagy úgynevezett stimuláció - 10 szint és 3 frekvencia. A felhasználó így állíthatja be a legmegfelelőbb stimulációs gyakoriságot, mivel a stimuláció erőssége 7-16 KPa között változhat, percenként 70-90 alkalommal.

2. Préselési ciklus - 15 szint 3 frekvenciával. A felhasználó beállíthatja a legmegfelelőbb nyomóerőket és frekvenciát, mivel

a nyomóerő 10 - 45 KPa között változhat.

3. Csendes motor, diszkréciót biztosítva.

4. Könnyű és kényelmesen hordozható.

5. Könnyen tisztítható.

I. A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT, MIELŐTT AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓT HASZNÁLJA!

1.A készüléket nem gyermekek számára szánják. Tartsa a készüléket és az adaptert gyermekektől elzárva.

2.A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

3.Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy elégtelen tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha megfigyelték vagy megtanították a készülék biztonságos használatára, és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A

gyermekeknek nem szabad megtisztítani vagy szervizelni.

4. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében:

-Ne használja az mellszívót zuhanyozás közben.

-Ne tegye vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy egy mosogatóba vagy kádba tolható.

-Ne tegyen és ne tegyen vízbe vagy más folyadékba.

•A terméket csak a használati útmutatóban leírt céljára használja. Ne telepítsen olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen fejlesztéseket vagy módosításokat a terméken. Ez hibás működést vagy a felhasználó megsérülését okozhatja.

•Ne használja ezt a terméket, ha sérült adapter vagy csatlakozó van, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, vagy ha vízbe esett.

•Tartsa az adaptert hőforrástól távol.

•Soha ne használja elalváskor vagy elalvás közben.

•Vigyázzon, ne ejtse le a terméket és ne tegyen más tárgyakat a lyukba vagy a csecsemő palackjába.

•Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter váltó feszültsége kompatibilis-e az áramforrás feszültségével.

•Csak a készletben szereplő hálózati adaptert használjon. Ha az adapter sérült, vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahonnan a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

•Ha Hepatitis A-val vagy Hepatitis B-vel fertőzött vagy HIV-pozitív (emberi immunhiányosság vírusa) van, az anyatej mellszívózáásával, akkor nem csökkenti vagy nem zárja ki annak kockázatát, hogy a vírus az anyatejbe terjedjen a baba számára.

•Ne vezessen elektromos mellmellszívó használata közben.

•Ne kísérelje Önmaga megváltoztatni vagy javítani a terméket sérülés esetén. Tanácsért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal vagy az értékesítési ügynökkel.

•A mellszívót csak egy felhasználó többszörös felhasználására tervezték. Ez a termék személyes használatra készült, és más anyák számára nem ajánlott.

•Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok játszanak a mellékelt termékkel, az adapterrel és tartozékokkal.

•Minden használat előtt ellenőrizze a mellszívót és az adaptert, hogy nem sérültek-e. Ne használja őket, ha valamelyik alkatrész megsérült.

•Ne használjon alkatrészeket, amelyek nem eredetiek, csak a gyártó vagy az importőr által biztosított elfogadott.

•Ne próbálja meg eltávolítani a mellszívót a melléből, amikor vákuum jön létre és a mellszívó működik. Kapcsolja ki a terméket, majd az ujjával válassza le a szilikon betétet a melléről.

•Ne használja a terhesség alatt, mivel ez serkenti a szülési folyamatot.

•Ne hagyja vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a szoba hőmérséklete túl magas, vagy közvetlen napfénynek van kitéve.

•Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, amíg a hálózatra van csatlakoztatva.

•Minden használat előtt mossa le, ürítse le és sterilizálja a mellszívó mosható részeit.

•Soha ne mossa és sterilizálja a termék elektromos alkatrészeit - a mellszívómotort és az adaptert, hogy ne károsítsa a terméket.

II. AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ RÉSZEI

PD Ábra: 1. Védőfedél; 2. Szilikon masszázsfúvóka; 3. Fedél; 4. Dugattyú; 5. Cső; 6. Mellszívótest 7. Légfurat; 8. Szelep; 9.Kipumpáló motor; 10. Tej üveg; 11. Adapter; 12. USB kábel;

•DD Ábra - Kijelző: 1. Frekvencia; 2. Fokok; 3. Az üzemmód szimbóluma; 4. Idő; 5. Stimuláció; 6. Kipréselés;

•TD ábra - Panel: 1. Be/Ki; 2. A munkamód szabályozása; 3. Frekvencia; 4. Lépés le; 5. Lépés fel

III. ELEKTRONIKAI ADATOK

Adapter / töltő: AC100V - 240V; DC 5 V, 1A;

• Az akkumulátor kapacitása: 1300 mAh

• Töltési idő: 2 óra

• ELLENŐRZÉSI MÓDSZER: GOMBOKKAL

• Kijelző: LCD

IV. A MELLSZÍVÓ ELEKTROMOS MOTORJÁNAK FELTÖLTÉSE

Hálózati csatlakozás:

1.Dugja a hálózati adapter kábelét a mellszívó alján lévő töltőaljzatba.

2.Csatlakoztassa a hálózati adaptert az elektromos aljzathoz.

3.Ne használja az emlőmellszívót töltés közben, mert az akkumulátor megsérül.

V. AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

FIGYELEM! SOHA NE STERILIZÁLJON ÉS NE MERÍTSEN VÍZBEN A MELLSZÍVÓ MECHANIZMUSÁT ÉS A CSÖVET, AMELY A SZIVATTÚ TESTÉVEL KAPCSOLJA ÖSSZE - 5. RÉSZ, (AD):

1.Lépés 1: Helyezze a szilikonszelepet (8) a mellszívótest alsó végére. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve a mellszívótest nyílásának végeihez. Fontos! Ha a szelep laza vagy nincs megfelelően beszerelve, nem lehet megfelelő vákuumot létrehozni!

2.Lépés 2: Rögzítse az adagoló palackot (10) a mellszívó testéhez (6) úgy, hogy óvatosan elforgatja az üveget az óramutatójárásával megegyezően, hogy a palack menete pontosan egybeessen a mellszívó test menetével.

3.Lépés 3: Helyezze a dugattyút (4) a mellszívótest felső részébe. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve a mellszívótest nyílásának végeihez.

4.Lépés 4: Helyezze a védőburkolatot a mellszívótest felső oldalára. Nyomja meg és fordítsa el az óramutató járásával megegyezően, hogy illeszkedjen a megfelelő helyzetbe.

5.Lépés 5: Tiszta kézzel helyezze be a szilikon fúvókát (2) a mellszívó testébe (6). Ellenőriznie kell, hogy szorosan van-e rögzítve. Tipp: Ha nem használja az emlőmellszívót, szerelje fel a védőburkolatot (1).

6.Lépés 6: Helyezze be a cső (5) egyik oldalát a mellszívótest (6) felé. Ezután illessze be a cső másik oldalát a mellszívómotorba (9). Így most már használhatja az mellszívót.

A megfelelő összeszerelés érdekében kövesse a mellékelt termék-összeszerelési ütemtervet.

VI. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A mellszívó használata (UD):

1. Alaposan mosson kezet, és ügyeljen arra, hogy a melle tiszta legyen. Adjon ki egy kis tejet annak ellenőrzéséhez, hogy a tejevezetékei ne legyenek elzárva. A mellszívónak sterilnek és összeszereltnek kell lennie.

2. Üljön le és lazítson egy kényelmes székben, kissé előrehajolva (Használjon puha és kényelmes párnát kényteláknaként).

3. Helyezze a mellszívót a mellére, és indítsa el a mellszívómotort.

A. Masszázs (stimuláció):

Ez a szolgáltatás elősegíti az anyatej áramlását. Javasoljuk, hogy először használja ezt az opciót, majd váltson kipréselő üzemmódra. A masszázsfolyamat utánozza a csecsemő szopását, nem túl keményen, és serkenti a tejáramlást. A pumpáló üzemmód a csecsemő szopását is utánozza, de erősebb, mint az első mód, egyenletesebb és nagy hatékonysággal. Nyomja meg az üzemmódválasztó gombot és aktiválja a masszázis funkciót. A stimulációs szintet a "+" és "-" gombokkal állíthatja be. Azok összesen 10. És a frekvencia gombon keresztül - a frekvencia fokait. Azok összesen 3.

B. Préselés:

Nyomja meg az üzemmódválasztó gombot és aktiválja a préselési funkciót. A préselési szinteket a „+” és „-” gombokkal állíthatja be. Azok összesen 15. És a frekvencia gombon keresztül - a frekvencia fokait. Azok összesen 3. Ha nincs pumpáló eredmény, ne folytassa! Próbálja meg a mellszívót a nap más időiben használni.

•Átlagosan 8 percig kell pumpálnia, hogy 120 ml tejet ürítsen. Ne feledje, hogy a tej mennyisége nökként eltérő. Ha úgy találja, hogy ülésenként általában több, mint 120 ml-t szorít ki, akkor nagyobb adagoló palackot kell használnia.

•Ne töltse túl a tejpalackot, hogy megakadályozza a tej kiszivárgását a palackból.

•Ha abbahagyja a mellszívó használatát, kapcsolja ki a BE/KI gombot. Ezután vegye le a csövet a mellszívótest hátuljáról. Távolítsa el a mellszívótestet a palackból. Csukja be az üveget a spirálgyűrűvel és a cumi segítségével, és tetejére helyezze el a fedelet, hogy steril maradjon

VII. MIKOR HASZNÁLÁK A MELLSZÍVÓT

1. Ha lehetséges. Általában két vagy négy héttel a baba születése után. A mellszívó minden használata előtt anyatejet kell kinyomni és az emlőt szoptatni.

2. Az mellszívó mindig használható az alábbi esetekben:

-Ha gyógyszer szed és a szoptatást folytatni akarja a gyógyszer leállítása után.

-Ha a mellbimbói duzzadtak és fájdalmasak, kipumpálhat a tej egy részét a fájdalom csökkentése érdekében, megkönnyítve ezzel a csecsemő számára a tej préselését.

-Ha fájdalmat vagy repedést tapasztal a mellbimbóján, akkor az anyatejet fejtheti ki, amíg a mellbimbó normalizálódik.

3. Ha utazás vagy más okok miatt egy ideig kell távolodnia a csecsemőjétől, és reméli, hogy a szoptatás újraegyesítése után folytatódik, akkor fenntarthatja az anyatej szekrécióját azáltal, hogy időszakosan mellszívózza a tej egy részét az elektromos mellszívó segítségével.

VIII. TANÁCSOK

Gyakorlat szükséges az mellszívó lehető legjobb kihasználásához. Ezért legalább néhány kísérletre van szüksége az elektromos mellszívó sikeres használatához.

1. Válasszon egy megfelelő csendes pillanatot a mellszívó használatához - egy olyan időszakban, amikor senki sem zavar.

2. Üljön egy kényelmes székbe, függőleges helyzetben a talajjal. A mellszívó használata előtt tegyen egy kényelmes párnát a háta mögött. Az ülő helyzet segít jobban érezni magát az mellszívó használata során.

Vegyen egy pohár vizet, és helyezze közel magához, mert szomjas lehet az anyatej mellszívóása során.

3. Helyezzen meleg törülközőt a mellére néhány percre, mielőtt elkezdi az anyatej kifejtését, ez megkönnyíti a folyamatot és enyhíti a mellek feszültségét.

4. A melegítés és a pihenés segít a tej mellszívózásában, így fürdhet vagy zuhanyozhat a mellszívó használata előtt.

5. Próbáljon a csecsemőt szoptatni az egyik mellnél és ezzel egyidőben mellszívózza a másik melléből tejet a pumpával, vagy folytassa a pumpálást, amint befejezte a csecsemő szoptatását.

6. Az emlőmellszívó helyzetének időről időre történő megváltoztatása jobb szekréciós stimulációhoz vezethet. Gyakoroljon, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb mellszívózási technikát. Ha a folyamat mellkasi fájdalmat okoz, azonnal állítson le és azonnal forduljon orvoshoz.

7. Ügyeljen arra, hogy ne takarjon le vagy dugítson el a mellszívóttest szellőzőnyílását.

8. Hibák az mellszívó használatokor:

9. Az elektromos emlőmellszívó olyan eszköz, amely segíti a nőket a szülés után a mellkasi fájdalom enyhítésében és a szoptatás meghosszabbításában. Az a feltevés, hogy elegendő tej van, és az emlőmirigy sima.

Azokban a nőkben, akik először válnak anyává, az emlőmirigy általában nem elég sima. Ennek oka néha a mellbimbók veleszületett befelé elfordulása vagy az anyatej hiánya lehet. Ezért azt javasoljuk, hogy az mellszívó megvásárlása és használata előtt konzultáljon orvosával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az emlőmirigy sima és az anyateje normál állapotban van. Ne vásároljon és ne használjon emlőmellszívót eszközként, csak arra, hogy a tejcsatornák eltömődését megszünteti.

IX. HOGYAN KELL TÁROLNI AZ ANYATEJET

1. Kizárólag egy steril mellszívóval összegyűjtött anyatejet lehet tárolni a csecsemő táplálására.

2. Az anyatej termosztiban tárolható 40°C-on, így négy óránként táplálhatja a csecsemőt.

3. Ha frissen kifejtett tejet tárol, zárja le a tejet, az anyatejet 10 órán keresztül 19-25°C-on szobahőmérsékleten lehet tárolni.

4. A kifejtett tejet legfeljebb 48 órán keresztül lehet hűtőszekrényben tárolni (de nem a hűtőszekrény ajtaján), vagy fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig.

5. A fagyasztott tejet először a hűtőszekrényben kell hagyni, hogy természetes módon olvadjon meg. Ha sürgősen szüksége van rá, tegye azt egy tál meleg vízben és olvasszon fel. Olvadás után a tejet hűtőszekrényben 24 órán keresztül lehet tárolni.

6. SOHA NE FAGYASZTJA ÚJRA A TEJET.

7. A fagyasztott tejet fokozatosan meleg vízben felmelegíthetjük vagy csecsemőüveg melegítőbe tehetjük.

8. SOHA NE MELEGÍTSE A TEJET MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN, MERT ILYEN MÓDON ELPUSTÍTHATJA AZ ÉLETFONTOSSÁGÚ

TÁPANYAGOKAT ÉS AZ ANTITESTEKET. Az egyenetlen felmelegedés az anyatej túl forró területekhez is vezethet, ami égési sérüléseket okozhat a babája felső emésztőrendszerében. Soha ne tegyen fagyasztott tejeüveget forrásban lévő vízbe, mert ez az üveg repedését/törését okozhatja. Soha ne öntsön forrásban lévő vizet közvetlenül a palackba. A palack feltöltése előtt hagyja, hogy a víz kb. 20 percig lehűljön.

X. A MELLSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS STERILIZÁLÁSA

Fontos: SOHA NE TISZTÍTSON VÍZZEL, VAGY SZTILIZÁLJALJA A MELLSZÍVÓ ÉS A CSATLAKOZÓ TÖMLŐ LCD-KIJELZŐJÉT (5).

Csak puha, száraz ruhával tisztíthatja.

Az első használat előtt és minden használat után tisztítsa meg és sterilizálja az elektromos mellszívót, az alábbi utasításokat követve.

STERILIZÁLÁS

1. Vegye le a csövet (5) a mellszívó mechanizmusról (9) és tegye félre. Szerelje szét az összes többi alkatrészt, az 1, 2, 3, 4,

6, 7, 8, 10-et, majd mossuk le meleg szappanos vízben és szárítsuk meg. Ne használjon antibakteriális vagy maró hatású tisztítószerkeket.

2. Sterilizáljon CSAK az alábbi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. részt gőzsterilizátorban vagy 10 percig forralva.

⊞ AJÁNLÁSOK A TISZTÍTÁSHOZ

1. Használjon gőz-sterilizátort. Az alkatrészek forralása nem ajánlott. Az első ok az, hogy a termék nem megfelelő sterilizálás esetén könnyen megsérülhet. Másodszor, a sterilizálási módszer nem érheti el a teljes hatást.

2. Ha úgy dönt, hogy a forralási sterilizációs módszerként használja, öntsön több vizet a tartályba, hogy az alkatrészek teljesen le vannak borítva. A terméket a sterilizálás során nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Ne forraljon túl sokáig - legfeljebb 10 percig.

3. Szoptató anyáknak, akik 2-3 óránként szoptatnak, nem javasoljuk a sterilizálást és a tisztítást minden használat után. A túlzott fertőtlenítés és tisztítás könnyen előidézheti az alkatrészek idő előtti öregedését és lerövidítheti az emlőmellszívó élettartamát. Javasolt a foltok alapos tisztítása és sterilizálása naponta egyszer.

4. Az alkatrészeket tiszta tartályban tárolja a következő használatig.

• FONTOS! Ha a mellszívót használja a tej tárolására, akkor vigyáznia kell a mellszívó összes mosható részének fertőtlenítésére, mert egyébként a tej könnyen megromlik, mivel ez nehezen tárolható termék.

FIGYELEM! Használat előtt ellenőrizze, hogy a mellszívóttest, a szelep, a dugattyú és a fedél száraz-e.

Ne sterilizálja a csövet - az 5. rész, hogy elkerülje a víz véletlen bejutását a mellszívó motorjába. Ha gőz-sterilizátort használ a mellszívó alkatrészeinek tisztításához, ügyeljen arra, hogy ne érintkezzenek a sterilizátor fűtőkészülékével. És ha forrást használ sterilizációs módszerként, vigyázzon, hogy az alkatrészek ne kerüljenek érintkezésbe az edény aljával amiben forraljuk.

XI. HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

.Vákuum hiánya:

•Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e felszerelve, és hogy a mellszívószelep megfelelően van-e felszerelve.

•Ellenőrizze, hogy a szilikon masszázsfúvóka és annak védőállványa megfelelően van-e elhelyezve és illeszkedik-e a mellszívó testéhez, és tökéletes vákuum alakul ki.

•Ellenőrizze, hogy a szilikonszelep szorosan van-e rögzítve a mellszívóttest nyílásához.

•Ellenőrizze a sérült alkatrészeket.

•Ha nem tudja bekapcsolni a mellszívót, ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

•A vákuum is gyengülhet, ha az akkumulátort fel kell tölteni.

2. A tejet nem lehet kifejteni:

•Lásd az 1. pontot.

•Ellenőrizze, hogy a mellszívó megfelelően van-e felszerelve és vákuum keletkezett.

•Pihenjen és próbálja újra.

•15 fokos mellszívózás van, a maximális erő 45KPa, és általában a csecsemő szorítóereje 20-30 KPa. Javasoljuk, hogy fokozatosan emelje meg a fokot, a legalkalmasabb fok legyen az, amelyben a nyomás fájdalommentes. Az alábbiak NEM érvényesek: minél erősebb, annál jobb. A túlzott szorítás megrongálhatja a mellbimbót.

3. Fájdalom az emlő területén, ahol kifejtí:

•Ha fájdalmat érez és a tej nem folyik préselés közben, akkor az emlőmirigy eltömődhet. Ebben az esetben masztitisz fordulhat elő. Időben forduljon orvoshoz. A tej teljes kifejtése jó hatással van a masztitisz megelőzésére.

•Lehet, hogy túl keményen nyomja. Nem kell a legmagasabb mellszívózási fokot használni, amelyet a mellszívó képes előállítani.

•Próbálja meg beállítani a megfelelő mellszívózási fokot és gyakoriságot.

4. A préselés túl lassú:

Az anyatej áramlási sebessége nökként eltérő. A magasabb szintű préselés nem jelenti a gyorsabb tejáramlást. Ez sok tényezőtől függ - a mell fizikájától, a hajlékonyság szintjétől, még a hangulattól is.

Minél rendszeresebben használja az emlőmellszívót, annál gyorsabban és könnyebben folyik a tej. Használat előtt tegyen fel egy meleg törülközőt a mellére, és kb. 5 percig használja a masszázis módot, mielőtt átvált a szorító üzemmódra.

5. A tej a szilikon masszázsfúvókára folyik le:

•Távolítsa el, helyezze be és állítsa be újra a masszázscsúcsot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szorosan rögzítve van-e és szorosan illeszkedik-e a tölcscr alsó középpontjához.

•Próbálja meg kissé előrehajolni.

6. A pumpáló alkatrészek/adagoló palackok meglazulása vagy elszíneződése/elsötétülése:

•Kerülje a csiszoló részecskékkel való érintkezést az antibakteriális vagy tisztítószerrel, mivel ezek károsíthatják a lágyult víz és a hőmérséklet-ingadozások bizonyos esetekben a műanyag repedését okozhatják. Ha ez megtörténik, ne használja újra a mellszívót. A mellszívóttest és a tejtaró tartályt a mosogatógépben biztonságosan lehet tisztítani, de az ételízes-színezék sötétedéshez vezethet. Pontosan kövesse a termék tisztítására vonatkozó utasításokat. Védje a terméket a közvetlen napfénytől, mivel a hosszan tartó expozíció a műanyag elszíneződését okozhatja.

7. Elveszett vagy törött alkatrészek:

•Pótalkatrészekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az importőrrel vagy a kiskereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Ne használjon azokat, amelyeket a termék gyártója nem engedélyez vagy ad.


•Ne kísérelje meg saját kezűleg megjavítani vagy átalakítani a terméket, mivel ez veszélyeztetheti a gyermeke egészségét.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket! Az elektromos emlőmellszívó biztonságos használatának és karbantartásának biztosítása érdekében óvatosan járjon el, és kövesse a kézikönyv utasításait. A termék üzemeltetésével, karbantartásával vagy javításával kapcsolatos kérdéseivel forduljon az importőrhez vagy a forgalmazóhoz, ahol a terméket vásárolta.


Összetevők: PP és szilikon.

RÉSZEI


PD

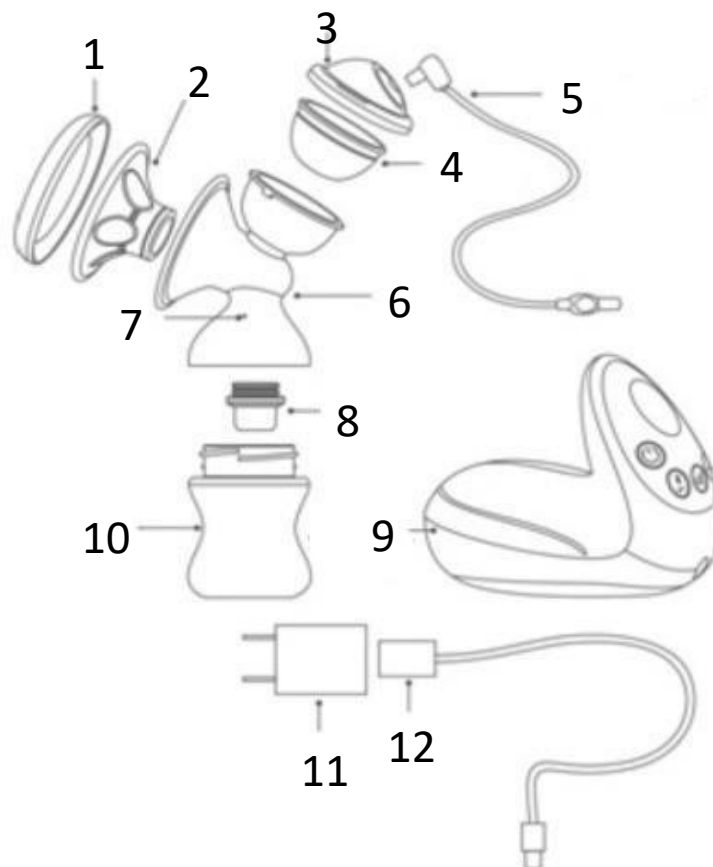

DD

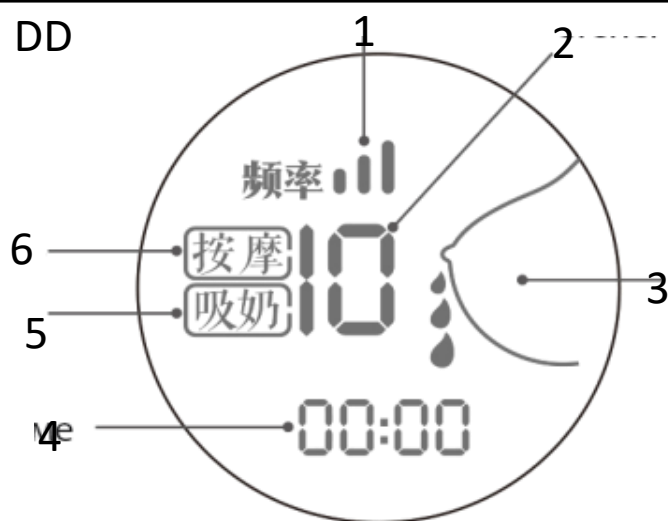

TD

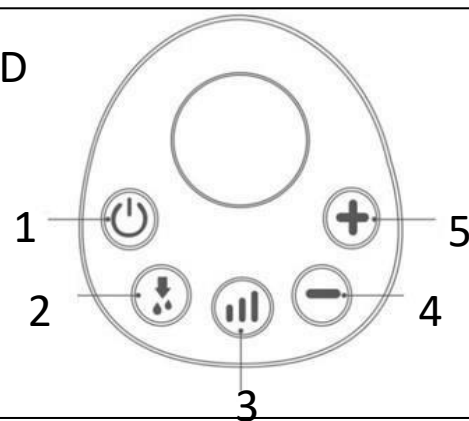

ÖSSZESZERELÉS

AD


①



②



③

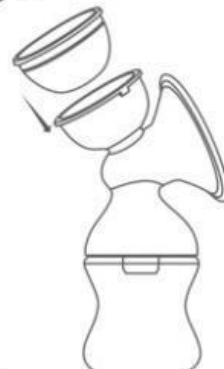

④



⑤



⑥



HASZNÁLAT

UD



A



B

