



Termék neve: SNOWDROP mellszívó

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com

emailcimen.Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!)

FONTOSS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRE, HELYES HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL.

FIGYELEM! AZ EZEN UTASÍTÁSBAN BIZTOSÍTOTT LEÍRÁSOK ÉS ÁBRÁK KIZÁRÓLAG SZEMLELTETÉSI CÉLRA SZOLGÁLÓK, ÉS AZ ÖN VÁSÁROLT TERMÉK ELTÉRHET ATTÓL.A Cangaroo kézi mellszívó számos olyan funkciót biztosít, amelyet az elfoglalt anyukák szeretnek, és több okból is tökéletes: •Az anyatej kifejtése és tárolása, amíg Ön távol van a babától, például amikor dolgozik. •A nagy mennyiségű anyatej miatti feszültség oldása a mellekben. Például amikor a baba táplálkozási szokásai megváltoznak, mert több szilárd anyagot kezdett enni. •A tejellátás fenntartása, ha átmenetileg abba kell hagynia a szoptatást. Például a nem megfelelő tej kifejtésére, miközben orvosi kezelés alatt áll. • Kompakt és diszkrét használatot biztosít, így bárhová magával viheti, és az anyatejet az Ön számára megfelelő időben lefejheti.

A kézi mellszívó puha masszírozó alátéttel van felszerelve, amely a puhaság és a melegség érzését hivatott megadni, és utánozni a baba szopását, serkentve az anyatej gyorsabb áramlását – könnyű, kényelmes és gyengéd. A mellszívó kompakt és könnyen összeszerelhető, minden alkatrésze mosogatógépben mosható, és nem tartalmaz Biphentyl – A-t.

Az egészségügyi szakemberek szerint az anyatej antitesteket tartalmaz, amelyek megvédik a babát a fertőzésektől és az allergiáktól. •A termék bevizsgált, és megfelel az EN14350:2020 szabvány követelményeinek.

JAVASLATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

1.A terméket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja. Ne helyezzen be olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen fejlesztéseket vagy változtatásokat a terméken, mert ez a termék meghibásodásához vagy a használó személy sérüléséhez vezethet.

2.FIGYELEM! Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy utasításban részesítette őket .

3.FIGYELEM! Gyermekek nem játszhatnak a kézi mellszívóval.

4.Figyelem! Az első használat előtt ellenőrizze a kézi mellszívót, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha ilyet talál, ne használja a terméket a hiba elhárításáig. Ne próbálja saját maga módosítani vagy javítani a terméket. Kérjen tanácsot egy hivatalos szerviztől vagy az értékesítési ügynöktől, akitől a kézi mellszívót vásárolta.

5. Ne használja terhes állapotban, mert ez stimulálhatja a születési folyamatot.

6. Soha ne használja, ha álmos vagy fáradt.

7. Ne hagyja el a terméket, és ne tartsa túl magas szobahőmérsékletű vagy közvetlen napfénynek kitett helyen .

8. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket, és ne tegyen más tárgyakat a nyílásába vagy a cumisüvegbe.

9.Figyelem! A kézi mellszívó kizárólag egy felhasználó általi ismételt használatra szolgál.

10. Ha Ön hepatitis A-val, hepatitis B-vel vagy HIV-vel (humán immundeficiencia vírus) fertőzött, az anyatej pumpálása nem csökkenti és nem szünteti meg annak kockázatát, hogy a vírust anyatejjel továbbítsák a babának.

11. Ne használjon olyan tartozékokat vagy pótalkatrészeket, amelyeket nem az eredeti szállította gyártó vagy az importőr. Ilyen használata esetén a garanciajegy érvénytelen lesz.

12. Minden használat után mossa le, öblítse le és sterilizálja a mellszívó összes alkatrészét.

13. Ne tisztítsa a mellszívót erős tisztítószerrel – alkohol alapú, például fehérítőt tartalmazó vagy karcoló részekkel.

14. Ne pumpáljon 5 percnél tovább szünet nélkül, ha a tej nem fejtődik ki.

15. Ha a vákuum és a nyomás kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, hagyja abba a mellszívó használatát úgy, hogy először az ujját a mell és a szilikon masszírozópárna közé helyezi, majd vegye ki a mellszívót a mellből.

16.FIGYELEM! Ez a termék személyes használatra készült, és nem alkalmas más anyák használatára.

II. ALKATRÉSZEK

Lásd az A ábrát: 1. Fogantyú; 2. Szilikon membrán; 3. Állítható szívókar (a fogantyú tengelye); 3. Szivattyústest;

4. Szilikon masszázspárna; 5. Szelep; 6.cumisüveg; 7. Porvédő sapka; 8.Palack átalakító

III. A KÉZI MELLSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

Győződjön meg arról, hogy alaposan megtisztította és sterilizálta a kézi mellszívó összes alkatrészét, mielőtt elkezdi az összeszerelést. Mosson kezet alaposan!

1. 1. lépés: Tiszta kézzel helyezze a szilikonselepet (6) a szivattyúházra (4).

2. 2. lépés: Csatlakoztassa a pumpa testéhez a teljesüveghez.

3. 3. lépés: Rögzítse a szilikon membránt a fogantyú szárával a szívókarhoz.

4. 4. lépés: Rögzítse a szilikon membránt a fogantyú szárával a pumpa testének felső részére úgy, hogy a belső végét ujjával a lehető legtávolabbra tolja, és ügyeljen arra, hogy tökéletesen illeszkedjen a pumpa minden oldalához a szivattyústest tölcisére.

5. 5. lépés: Rögzítse a szivattyú fogantyúját a tengelyhez, és rögzítse a szivattyúházon lévő, erre szánt állványhoz. Óvatosan nyomja, amíg kattanó hangot nem hall, ami a fogantyú rögzítését jelzi.

6. 6. lépés: Rögzítse a szilikon masszírozó párnát a szivattyústesthez úgy, hogy a belső végét finoman tolja a lehető legtávolabbra, és győződjön meg arról, hogy tökéletesen illeszkedik a szivattyúház tölcisére minden oldalához.

Ha nem használja a pumpát, tegye rá a porvédő sapkát.

IV. HASZNÁLATI MÓD

1.Moss kezet, és győződj meg róla, hogy a melled tiszta. Nyomjon ki egy kis tejet, hogy ellenőrizze, nincs-e eltömődve a tejszatornák.

2. A szivattyút sterilizálni és össze kell szerelni.

3. Helyezze a pumpát a mellére.

4. Ügyeljen arra, hogy a mellbimbó közepén legyen, hogy a szilikon masszírozópárna tökéletesen illeszkedjen a melléhez, és tökéletes vákuumot hozzon létre (ne engedje be a levegőt).

5. Kezdje el óvatosan lefelé nyomni a fogantyút, amíg enyhé szívást nem érez. Ezután hagyja el a fogantyút, hogy visszatérjen a kiindulási helyzetbe. Ismételje meg ezt a lépést néhányszor gyorsan a kifejezés serkentése érdekében.

6. Állítson be lassabb ritmust úgy, hogy lefelé nyomja a fogantyút, és legfeljebb 3 másodpercig tartsa lenyomva, majd hagyja vissza a kiindulási helyzetbe. Folytassa ezt a kifejezést. Ha elfárad a keze, próbálkozzon a másikkal, vagy hagyja a kezét a testére ellazulni, és a másik mellből kifeszül.

7.Győződjön meg arról, hogy a tej sikeresen folyik, és a pumpálás folyamata nem okoz kényelmetlenséget.

8.Nem szükséges teljesen lefelé nyomni a fogantyút, hanem csak abba a pozícióba, amelyben jól érzi magát.

9. Ne aggódjon, ha a tej nem folyik ki azonnal, lazítson és folytassa a pumpálást. Ha a folyamat mellfájdalmat okoz, azonnal hagyja abba, és forduljon orvoshoz. Ha a mellszívásnál nincs eredmény, ne folytassa!

Próbálja meg a szivattyút más napszakban használni.

10. Átlagosan 8 percig kell szivattyúznia 120 ml tej kifejtéséhez. Ne feledje, hogy a tej mennyisége nőről nőre változik. Ha úgy találja, hogy általában több mint 120 ml-t szív ki az ülés során, akkor nagyobb üveget kell használnia. Ne töltse túl az üveget, különben a tej kifolyik rajta.

11. A kifejtés leállítását után óvatosan vegye le a pumpát a melléről, és csavarja le a tejes palackot a pumpa testéről.

Tisztítsa meg a többi használt alkatrészt a „Tisztítás és sterilizálás” részben leírtak szerint.

V. MIKOR KELL HASZNÁLNI A MELLSZÍVÓT

1.Ha lehetséges. Csak akkor, ha elegendő tejelválasztással rendelkezik, és a szoptatáshoz megfelelő ideje van. Általában a kézi mellszívó használata két vagy négy héttel a baba születése után kezdődhet. Meg kell határozni az anyatejleválasztás és a szoptatás ütemezését.

2. A következő esetekben mindig használhatja mellszívóját: •Ha kórházi tartózkodása alatt olyan anyatejet ereszt ki, amellyel a babát táplálni kívánja. •Ha több anyatejed van, étkezések között is lefejthetsz belőle, hogy csökkentsd a kidudorodó mell fájdalmát, és így könnyebben szophat a baba. •Ha a mellbimbói fájdalmasak vagy repedeznek, tejet fejthet ki az etetéshez, amíg a mellbimbók javulnak.

3. Ha el kell válnia a babától, és abban reménykedik, hogy a találkozás után is folytathatja a szoptatást, a tejelválasztás fenntartása érdekében időszakonként lefejtheti az anyatejet.

VI. TIPP EK

Gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy a mellszívót a lehető legjobb módon használhassa. Tehát legalább néhány próbálkozásra lesz szüksége, mielőtt sikeresen tudja használni a kézi mellszívót.

1. Válasszon egy csendes időszakot a mellszívó használatához – olyan időt, amikor senki sem zavarja Önt. Ha újra dolgozik, előfordulhat, hogy a szünetekben tejet kell lefejtetni.

2.Új le egy kényelmes székre, a talajra merőlegesen. A mellszívó használatának előtt tegyen egy kényelmes párnát a háta mögé. Az ülő helyzet segíthet abban, hogy kényelmesebben érezze magát a mellszívó használatában közben. Vegyen egy pohár vizet és tegye a közelébe, mert szomjas lehet a pumpálás során.

3. Helyezzen meleg kendőt a melleire néhány percre az anyatejlefejtés megkezdése előtt, mert ez megkönnyítheti a folyamatot, és enyhítheti a feszültséget a mellekben.

4.Melegség és ellazulás segíti a könnyebb tej kifejezést, így a mellszívó használata előtt fürödhet vagy zuhanyozhat.

5. Próbálja meg szoptatni a babát az egyik mellén, és ezzel párhuzamosan a tej jobb stimulációját használja a másikon. Gyakoroljon, hogy megtalálja az Ön számára legjobb kifejtési technikát.

6.A mellszívó helyzetének időnkénti megváltoztatása a mellén a váladék jobb stimulációjához vezethet. Gyakoroljon, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb szivattyúzási technikát. Ha a folyamat mellfájdalmat okoz, azonnal hagyja abba, és azonnal forduljon orvoshoz.

7.Győződjön meg arról, hogy nem tömítette el vagy takarta el a szivattyúház levegőkimenetét.

8. Mellszívó használatának hibái: A kézi mellszívó egy olyan készülék, amely segít a szülés utáni nőknek a mellfájás csillapításában és a szoptatási idő meghosszabbításában.

Azt a feltevést használja, hogy elegendő tej és sima emlőmirigy van. Egyes nőknél, akik először anyák, az emlőmirigy általában nem elég sima. Ennek oka néha a veleszületett mellbimbó-inverzio vagy a tejvívhiány. Ezért azt javasoljuk, hogy a pumpa megvásárlása és használata előtt konzultáljon orvosával, aki meg tudja állapítani, hogy emlőmirigye sima és az anyatej normális állapotban van. Ne vásárolja meg és ne használja a pumpát kizárólag tejszatornák elzárásának feloldására szolgáló eszközként.

VII. HOGYAN KELL AZ ANYATEJET TÁROLNI

1.Csak steril pumpával összegyűjtött tejet szabad tárolni a baba etetéséhez.

2.Az anyatej 40°C-os cumisüvegmelegítőben tárolható, így 4 órán belül meg tudja etetni a babát.

3. Frissen lefejt tej tárolásakor kérjük, zárja le a tejet. Az anyatej 19-25°C-os szobahőmérsékleten 10 órán át tárolható.

4. A lefejt tej hűtőben legfeljebb 48 óráig (de nem a hűtőszekrény ajtaján), vagy fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig tárolható. Erre a célra használja a „Cangaroo Care” anyatejtároló zacskókat .

5.A fagyasztott tejet hűtőbe kell tenni, hogy természetes módon felolvadjon. Ha sürgősen szüksége van rá, meleg vízbe teheti és felengedheti. Felolvasztás után az anyatej 24 órán át hűtőszekrényben tárolható.

6. SOHA TÖBBÉ NE FAGYASZTJA FEL AZ ANYATEJET.

7.Fokozatosan felmelegítheti a fagyasztott anyatejet meleg vízben vagy cumisüveg melegítővel.

8.SOHA NE MELEGÍTSD MEG AZ ANYATEJET MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN, MERT ELVESZETHETNEK TÁPANYAGOKAT ÉS ANTITESTEKET. Az egyenetlen melegítés az anyatej túl forró területeit eredményezheti, ami égési sérüléseket okozhat a baba felső emésztőrendszerében. Soha ne tegyen fagyasztott tejes palackot forrásban lévő vízbe, mert ez a palack szétrepedését/eltörését okozhatja. Soha ne öntsön forrásban lévő vizet

közvetlenül a cumisüvegbe. Hagyja a vizet körülbelül 20 percig hűlni, mielőtt feltölti az üveget.

VIII. TISZTÍTÁS ÉS STERILIZÁLJA A KÉZI MELLPUMPÁT

Tisztítsa meg és sterilizálja kézi mellszívóját az első használat előtt, és minden használat után, kövesse a felsorolt utasításokat.

1. Szerelje szét teljesen a kézi mellszívót.

2. ÓVATOSAN vegye le és tisztítsa meg a szilikon szelepet. Ha megsérül, nem tud vákuumot létrehozni, és a tej nem fejeződik ki.

3. Mossa le az összes alkatrészt kis mennyiségű forró vízzel és egy kevés nem agresszív tisztítószerrel, majd alaposan mossa le. Az alkatrészeket mosogatógépben is moshatja, csak a felső kosárban.

4. A szelep mosásához finoman dörzsölje az ujjai között folyékony mosószerrel. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szelepbe, mert ez károsodáshoz vezethet.

5. Sterilizálja az összes alkatrészt gőzsterilizátorban. Minden szoptató anyának, aki 2-3 óránként szoptat, nem javasoljuk a sterilizálást minden használat után. A túlzott fertőtlenítés és tisztítás könnyen idő előtti öregedéshez vezethet, és csökkenti a mellszívó élettartamát. Javasoljuk, hogy a foltokat alaposan megtisztítsák és naponta egyszer sterilizálják.

6. FONTOS! Ha az anyatej tárolására szolgáló eszközként használja a mellszívót, akkor gondoskodnia kell a pumpa összes mosható részének fertőtlenítéséről, különben a tej megromolhat, mivel nehezen tárolható termékről van szó.

IX. AZ ANYATEJPUMPA TÁROLÁSA

Tartsa távol a kézi mellszívót közvetlen napfénytől, mert a folyamatos expozíció elszíneződést okozhat. • A kézi mellszívót és tartozékait biztonságos, száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

X. HIBAELEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Szíváshiány:

Ellenőrizze, hogy az összes alkatrészt megfelelően helyezte-e be, és hogy a szilikonszelep szorosan illeszkedik-e a szivattyúház nyílásához.

• Győződjön meg arról, hogy a szilikon masszírozópárna megfelelően van elhelyezve, illeszkedik a szivattyú testéhez, és tökéletes tömítés jön létre.

2. Az anyatej nem fejezhető ki: • Kérjük, győződjön meg arról, hogy a mellszívó megfelelően van összeszerelve és vákuum keletkezik. • Lazítson, és próbálja újra.


3. Fájdalom a mell területén a pumpa használatakor: • Hagyja abba a kézi mell használatát, és konzultáljon szaktanácsadójával a szoptatással kapcsolatban. Ha a pumpa nem válik le könnyen a mellről, megtörheti a vákuumot, ha ujját a mell és a masszírozópárna közé, vagy a mell és a pumpa tölcse közé helyezi.

4. Az anyatej lefolyik a masszírozó párnán: • Vegye ki, helyezze vissza és helyezze vissza a masszírozó betétet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az szilárdan rögzítve van a tölcse középső alsó részéhez. • Próbáljon egy kicsit előre dőlni.

5. A pumpa/cumisüveg alkatrészeinek repedése és elszíneződése: • Kerülje el az antibakteriális tisztítószerrel vagy koptató részekkel való érintkezést, mivel ezek a műanyag részek károsodásához vezethetnek.

A mosószer, tisztítószer, sterilizáló oldat, enyhe víz, lágyított víz és változó hőmérséklet kombinációja bizonyos esetekben a műanyag megrepedéséhez vezethet. Ha ez előfordul, kérjük, ne használja a terméket. A pumpa teste és az anyatej-tároló edény mosogatógépben is mosható, de a többi edényen hagyott étel elsötétülhet. Pontosan kövesse a tisztítási utasításokat. Tartsa távol a terméket közvetlen napfénytől, mivel a hosszan tartó expozíció a műanyag részek elszíneződését okozhatja. 6. Elveszett vagy törött alkatrészek: • Pótalkatrészekért forduljon a hivatalos szervizközponthoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ne használjon olyanokat, amelyeket nem hagyott jóvá vagy nem a gyártó szállított. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani vagy módosítani a terméket, mert ez veszélyeztetheti az Ön és gyermeke egészségét.

ALKATRÉSZEK

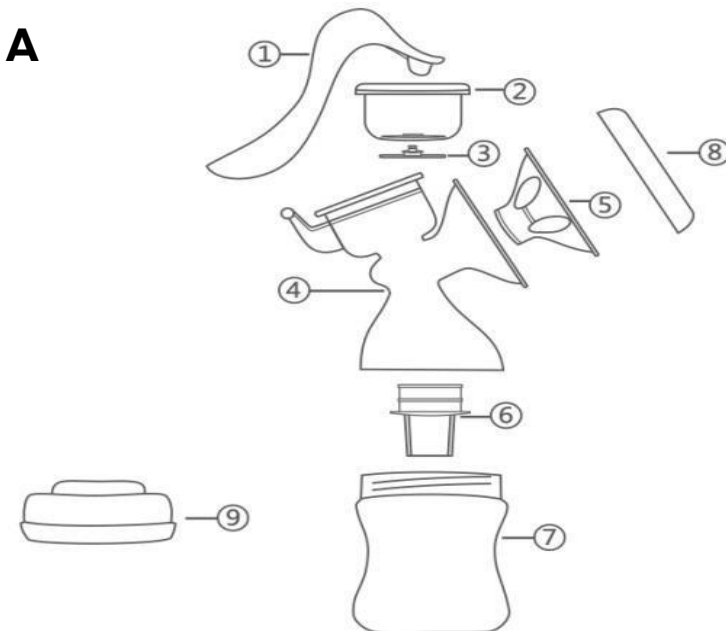

ÖSSZESZERELÉS

