



BIANCA MELLSZÍVÓ

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA MEG!

Gratulálunk ennek az elektromos mellszívónak a megvásárlásához. Ez a termék egy elektromos mellszívó a szívóerő különböző fokozataival, egyedi szeleppel finom szívással és lágy masszírozó szilikon gélpárnával. A Cangaroo elektromos mellszívó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket az elfoglalt anyák szeretnek, és több okból istökéletes:

•Az anyatej lefejtése és összegyűjtése, amikor távol van a babától. • A nagy mennyiségű anyatej okozta feszültség enyhítése a mellekben. Például amikor a baba táplálkozási szokásai megváltoznak, mert több szilárd anyagot kezdett enni. • A tejellátás fenntartása, ha átmenetileg abba kell hagynia a szoptatást. A Cangaroo elektromos mellszívó a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- 1.Masszázs ciklus, úgynevezett stimuláció –9 fokozat.
2. Szívó funkció –9 szint.
- 3.Kombinált funkciós masszázis szívással. 9 fokozatú: 5 fokozatú masszázis és 4 fokozatú szívás.
4. Csendes motor diszkréciót biztosít.
5. Könnyű és könnyen hordozható.
6. Könnyen tisztítható.

I. JAVASLATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

- 1.A terméket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja.
- 2.Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha megtanították a megfelelő használatra a használati utasítás alapján.
- 3 Figyelem! A mellszívó csak egy felhasználó általi ismételt használatra készült.
- 4.Figyelem! Gyermekek nem játszhatnak a kézi mellszívóval.
- 5.Figyelem! Az első használat előtt ellenőrizze a mellszívót, beleértve az adaptert is, nincs-e rajta sérülés. Ha ilyet talál, ne használja a terméket a hiba elhárításáig. Ne próbálja saját maga módosítani vagy javítani a terméket. Kérjen tanácsot egy hivatalos szerviztől vagy az értékesítési ügynöktől, akitől a kézi mellszívót vásárolta.
6. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen fejlesztéseket vagy változtatásokat a terméken, mivel ez a termék meghibásodásához vagy a használó személy sérüléséhez vezethet.
7. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem a gyártó vagy az importőr által szállított eredeti alkatrészek. Ilyen használat esetén a jótállási jegy érvénytelen lesz.
8. FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében kérjük: • Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben. • Ne helyezze és ne tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy kádba vagy mosogatóba lökhetik. • Ne tegye vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba. • Ne nyúljon vízbe esett termék után. Azonnal húzza ki a fali konnektorból. • Soha ne használja a terméket, ha sérült adaptere vagy csatlakozója van, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy ha vízbe esett. • Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter feszültsége kompatibilis az áramforrással. • Csak a készletben található hálózati adaptert használja. Ha az adapter megsérült, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta.

A terméket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor az elektromos fali aljzatba van csatlakoztatva.

A MELLSZÍVÓ használata közben ne közelítsen magas hőmérséklethez vagy tűzforrásokhoz.. Ne használja terhes állapotban, mert ez stimulálhatja a születési folyamatot.

Soha ne használja, ha álmos vagy fáradt.

Ne hagyja el, és ne tartsa túl magas szobahőmérsékletű vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket, és ne tegyen más tárgyakat vagy folyadékokat a nyílásába vagy a cumisüvegbe.

Ha Ön hepatitis A-val, hepatitis B-vel vagy HIV-vel (humán immunhiány vírus) fertőzött, az anyatej pumpálása nem csökkenti vagy megszünteti annak kockázatát, hogy a vírus anyatejjel továbbítsák a babának.

Vákuum alatt ne próbálja meg eltávolítani a pumpa testét a mellről. Kapcsolja ki a készüléket, és ujjával törje meg a tömitést a mell és a szilikon betét között, majd vegye ki a pumpát a mellből.

Minden használat után mossa le, öblítse le és sterilizálja a mellszívó összes részét. Ne tisztítsa a mellszívó részét erős tisztítószerrel –alkohol alapú, például fehérítőt tartalmazó vagy súroló hatású részekkel.

Soha ne mossa és sterilizálja a termék elektromos részeit –a MELLSZÍVÓ motorját és a hálózati adaptert, hogy ne okozzon maradandó károsodást a termékekben.

FIGYELEM! Ez a termék személyes használatra készült, és nem alkalmas más anyák használatára.

A készletben található anyatejes palack a mellszívó szerves része. A termékhez csak ezt az üveget használja, és csak a pumpával gyűjtött anyatejhez.

GYERMEKE BIZTONSÁGÁÉRT ÉS EGÉSZSÉGÉÉRT FIGYELMEZTETÉS! • A terméket mindig felnőtt felügyelete mellett használja. • Soha ne használjon etetőcumit cumiként. • A folyamatos és hosszan tartó folyadékszívásfogszuvasodást okoz. • Etetés előtt mindig ellenőrizze az élelmiszer hőmérsékletét. • A nem használt alkatrészeket tartsa gyermekektől távol. • A sérülés vagy gyengeség első jeleire dobja ki. • Gondosan ellenőrizze minden használat előtt. Húzza meg a cumit minden irányba. A sérülés vagy gyengeség első jeleire dobja ki.

•Ne hagyja a cumit közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak, vagy fertőtlenítőszerben (sterilizáló oldat) az ajánlottnál hosszabb ideig, mert ez gyengítheti a cumit.

II. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA ÉS AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ HASZNÁLATA VEZÉRLŐPANEL

PD ÁBRA - ALKATRÉSZEK: A. Szilikon masszírozó betét; B. Kürt szája és pumpatest; C. Szilikon membrán; D.MELLSZÍVÓ mechanizmus ; E. Szelep; F. Cumisüveg (180 ml); G. palackkupak; H. Palackgyűrű; I. Csatlakozóső + adapter a MELLSZÍVÓ szerkezet akkumulátorának töltéséhez; J. Porvédő pajzs; K. tömitőtárcsa;

CP ÁBRA –PANEL: • BE/KI/ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ: Hosszan megnyomva kapcsolja be/ki a MELLSZÍVÓt. Röviden nyomja meg az üzemmódváltáshoz. • L –Masszázs/ szívási szint kijelző; • IL –a masszázis/ szívás szintjének növelése; • BD - Akkumulátor töltésszelző;

S - Kombinált funkciós masszázis szívó kijelzővel; • P –•MELLSZÍVÓzási mód kijelzése;

•RL –Csökkentse a masszázis/szívási szintet

III. ELEKTROMOS JELLEMZŐK

A mellékelt töltő/adapter: AC 100-240V 50/60Hz; DC: 5V/ 1 A • Beépített újratölthető akkumulátor: 3,7V-1200 mAh •

Teljesítmény: 4W, Zajhatár: 60dB(A), Motorvédelem: II, Használati feltételek: 5°C40°C, Töltés idő: 150-180 perc, Használati idő teljes töltés után: 150 perc, Vezérlés módja:

érintőképernyős panel, Kijelző: LED

IV. AKKUMULÁTORTÖLTŐ

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

2A mellszívó beépített akkumulátorral rendelkezik 3,7V/1200 mAh.

3Töltés: Csatlakoztassa az adaptert a pumpáló mechanizmus töltőaljzatához.

Dugja be a csatlakozódugót otthona hálózati aljzatába. Javasoljuk, hogy a következő használat előtt hagyja teljesen feltölteni a mellszívót, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

4. Csak a mellszívóhoz mellékelt töltőt használja. Ne használjon más termékek töltőit.

Időben tölts fel az akkumulátort. Töltsd fel, amint az akkumulátorszíjelző 1 sávot mutat, vagy a jelző villogni kezd. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény abbahagyja a villogást. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tölts fel teljesen az akkumulátort, mielőtt elrakná. Ezután tölts fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. Ha az akkumulátor megsérült vagy már nem tölthető, ne próbálja meg egyedül felnyitni a terméket. Tanácsadásért és javításért lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel/forgalmazóval. Az akkumulátor újrahasznosítható. Ha a termék megsérült és tovább nem használható, vegye el az elektronikai hulladékok, akkumulátorok, töltők hivatalos gyűjtőhelyére. NE dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. Kövesse az országában érvényes szabályokat az elektromos és elektronikus termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan. Az ilyen típusú hulladékok csak az arra kijelölt helyre dobja. Ez fontos és jelentős hozzájárulás lesz a környezetvédelemhez, valamint az akkumulátorokban és elektronikus alkatrészekben található anyagok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak csökkentésére.

V. AZ ELEKTROMOS MELLMELLSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

FIGYELEM! SOHA NE STERILIZÁLJA KÖZVETLENÜL HASZNÁLAT ELŐTT A MELLSZÍVÓ MECHANIZMUSÁT ÉS A MELLSZÍVÓTESTHEZ CSATLAKOZÓ CSÖVET.

Kövesse a termék összeszerelésének utasításait és sorrendjét, amely a mellékelt szövegben és képekben található.

1. 1. lépés (1. ábra): Helyezze be a szilikon masszírozó betétet (A) a kürt szájába (B), és finoman nyomja össze őket, hogy biztosítsa a szükséges tömitést. Helyezze fel a porvédőt (J). Rögzítse az összeszerelt alkatrészt a MELLSZÍVÓházhöz, ügyelve arra, hogy jól rögzítve legyen.

2. 2. lépés (2. ábra): Helyezze a szelepet (E) a MELLSZÍVÓház alsó végére. Győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzítve van a MELLSZÍVÓház számára szánt nyílás végei körül. Fontos! Ha a szelep laza vagy nem megfelelően van beszerelve, nem lehet elegendő vákuumot létrehozni! Rögzítse a cumisüveget (F) a pumpa testéhez úgy, hogy az üveget finoman az óramutató járásával megegyező irányba forgatja úgy, hogy az üveg mente pontosan egybeessen a pumpaház menetével 3.3. lépés (3. ábra): : Helyezze be a szilikon membránt (C) a MELLSZÍVÓház felső részébe. Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa meg vagy karcolja meg a hengert, mert ez befolyásolja a MELLSZÍVÓzási vákuumot.
4. 4. lépés (4. ábra): Helyezze be a MELLSZÍVÓszerkezetet (D), és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
5. 5. lépés (5. ábra): Az összeszerelés kész, és használhatja a mellszívót.

VI. HASZNÁLAT

1. Moss alaposan kezét, és győződj meg róla, hogy a melled tiszta. Adjon le egy kis tejet, hogy ellenőrizze, nincs-e elzárva a tejszatórnája. A MELLSZÍVÓnak sterilnek és összeszereltnek kell lennie.

2. Üljön le és lazítson egy kényelmes széken, kissé előre dőlve (Használjon puha és kényelmes párnát háttámlaként). Helyezze a pumpát a mellére, és indítsa el a pumpa motorját.

A pumpa használata

A. Masszázs (stimuláció): Ez a funkció serkenti az anyatej áramlását. Javasoljuk, hogy először használja ezt az opciót, majd váltson szívás módra. A masszázis mód a baba szopását utánozza, nem túl intenzív, és serkenti a tej áramlását. A szívási mód is utánozza a baba szopását, de erősebb, mint az első mód, gyakoribb alapon és nagyon hatékonyan.

A "+" és a "-" gombok segítségével beállíthatja azt a szintet, amelyen a legkényelmesebb az anyatej stimulálása. Ennek az üzemmódnak 9 fokozata van. Ha elkezd folyni az anyatej, váltson szívás üzemmódra.

B. Szívás: Nyomja meg az üzemmódválasztó gombot, és aktiválja a szívás funkciót. A „+” és „-” gombok segítségével beállíthatja az Ön számára leghatékonyabb és legkényelmesebb szorítási szintet. Ennek a módnak 9 szintje van.

C. Kombinált funkciós masszázsszívással: Kezddeti a kombinált funkcióval is. Nyomja meg az üzemmódválasztó gombot a szívással kombinált masszázsfunkció aktiválásához. Ennek az üzemmódnak 9 fokozata van –5 masszázsszint és 4 szívási fokozat. A szinteket a „+” és „-” gombokkal állíthatja be.

Átlagosan 10-15 percig kell pumpálnia 180 ml tej kiürítéséhez. Ne feledje, hogy a tej mennyisége nőről nőre változik.

Ne töltse túl a tejesüveget, nehogy a tej kifolyjon az üvegből. Ha abbahagyja a MELLSZÍVÓ használatát, kapcsolja ki a BE/KI gombbal. Ezután távolítsa el a csövet a MELLSZÍVÓház hátuljáról. Távolítsa el a MELLSZÍVÓtestet a palackból. Zárja le az üveget a gyűrűvel és a cumival, és helyezzen rá kupakot, hogy steril maradjon.

Akkumulátor töltésciklus: • Az akkumulátor töltésciklusja töltés közben villog, és a töltés befejezésekor leáll. • Ha az akkumulátor lemerülőben van, a jelzőfény villogni kezd, és a MELLSZÍVÓ automatikusan kikapcsol.

VII. MIKOR HASZNÁLJA A MELLPUMPÁT

Ha lehetséges. Az elektromos mellszívó használata általában két vagy négy héttel a baba születése után kezdődhet.

A pumpa minden egyes használata előtt el kell végezni az anyatej kiválasztását és a szoptatást. Az elektromos pumpa egy olyan készülék, amely segít a szülés utáni nőknek a fájdalom enyhítésében és a szoptatási idő meghosszabbításában. Azt a feltevést használja, hogy elegendő tej és sima emlőmirigy van. Egyes nőknél, akik először anyák, az emlőmirigy általában nem elég sima. Ennek oka néha a veleszületett mellbimbó-inverzió vagy a tejvízhiány. Ezért azt javasoljuk, hogy a pumpa vásárlása és használata előtt konzultáljon orvosával, aki meg tudja győződni arról, hogy emlőmirigye sima és az anyatej normális állapotban van. Ne vásárolja meg és ne használja a pumpát kizárólag tejszatórnák elzárásának feloldására szolgáló eszközként.

VIII. TÍPEK

Gyakorlatra van szükség a mellszívó lehető legjobb használatához. Tehát legalább néhány próbálkozásra lesz szüksége, mielőtt sikeresen elkezd használni az elektromos mellszívót. Válasszon egy csendes időszakot a MELLSZÍVÓ használatához –amikor senki sem zavarja Önt.

Ülj le egy kényelmes székre, a talajra merőlegesen. Kérjük, tegyen egy kényelmes párnát a háta mögé, mielőtt elkezd használni a mellszívót. Vegyen egy pohár vizet és tegye a közelébe, mert szomjas lehet a pumpálás során. Helyezzen egy meleg kendőt a melleire néhány percre, mielőtt elkezd a tejet, mert ez megkönnyítheti a folyamatot, és enyhítheti a feszültséget a mellekben.

A melegség és az ellazulás segíthet az anyatej könnyebb kiszívásában, ezért a pumpa használata előtt érdemes fürödni vagy zuhanyozni.

Próbáljon kifejtetni az egyik mellből, miközben a baba a másik mellből táplálkozik, vagy közvetlenül az etetés után folytassa a kifejtést.

Ha időnként áthelyezi a pumpát a mellére, az elősegítheti a váladékozás serkentését. Gyakoroljon, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbb MELLSZÍVÓzási technikát. Ha a folyamat mellfájdalmat okoz, azonnal hagyja abba, és forduljon orvoshoz.

IX. HOGYAN KELL AZ ANYATEJET TÁROLNI

• Csak steril mellszívóval gyűjtött anyatej tárolható a baba táplálására. A tej termosztóban 40 fokon tárolhatóig 4 óránként etetheti a babát.

• Ha frissen lefejt tejet tárol, zárja le a tejet. A tej szobahőmérsékleten, 19 - 25 fokon 10 óráig tárolható 4. A lefejt tej hűtőszekrényben maximum 48 óráig (de nem a hűtőszekrény ajtaján) vagy fagyasztóban maximum 3 hónapig tárolható. A fagyasztott tejet először a hűtőben kell hagyni, hogy természetes módon felolvadjon. Ha sürgősen szükség van rá, tedd egy tál meleg vízbe, és olvaszd fel. Felengedés után a tej 24 órán át hűtőszekrényben tárolható.

A TEJET NE FAGYASSZA ÚJRA.

A fagyasztott tej fokozatosan melegíthető meleg vízben, vagy cumisüveg melegítőbe helyezhető.

Ezenkívül az egyenetlen melegítés az anyatej túlmelegedéséhez vezethet, ami égési sérüléseket okozhat a baba felső emésztőrendszerében. Soha ne tegyen fagyasztott tejesüveget forrásban lévő vízbe, mert ez a palack szétrepedését/eltörését okozhatja. Soha ne öntsön forrásban lévő vizet közvetlenül a cumisüvegbe. Körülbelül 20 percig hagyja hűlni a vizet, mielőtt feltölti az üveget.

X. A MELLSZÍVÓ TISZTÍ TÁSA ÉS STERILIZÁLÁSA

Fontos: SOHA NE TISZÍTSA VÍZZEL, és NE STERILIZÁLJA A MELLSZÍVÓ MECHANIZMUSÁT, CSATLAKOZÓCSÖVET ÉS AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉHEZ SZÁNT ADAPTERT. Csak puha, száraz ruhával tisztíthatja. Tisztítsa meg és sterilizálja elektromos MELLSZÍVÓját az első használat előtt és minden használat után az alábbi utasításokat követve. A MELLSZÍVÓ tisztításához elektromos sterilizátor, mikrohullámú sterilizátor vagy forralás használatát javasoljuk.

Ne használjon UV sterilizátort vagy mosogatógépet a MELLSZÍVÓ tisztításához

STERILIZÁLÁS: Távolítsa el a MELLSZÍVÓ mechanizmust (D), és tegye félre. Válasszon szét minden más részt, mossa le meleg szappanos vízben és szárítsa meg. Ne használjon antibakteriális vagy korrozív tisztítószerket. • CSAK a következő részeket sterilizálja: Szilikon masszírozó betét (A); Kürt szája és pumpatest (B); Szilikon membrán (C); Szelep (E); Cumisüveg (F); Palack rés (G); Palackgyűrű (H); Porvédő (J); Tömitőtárcsa (K). • A maximális sterilizálási idő gőz- vagy forrásban lévő sterilizátorban körülbelül 8-10 perc.

AJÁNLÁSOK A TISZTÍTÁSHOZ

Használjon gőzsterilizátort. Az alkatrészek forralása nem ajánlott. Az első ok az, hogy a termék könnyen megsérülhet, ha nem megfelelő sterilizálást alkalmaznak. Másodszor, ezzel a sterilizációs módszerrel nem lehet teljes hatást elérni. • Ha a forralás mellett dönt sterilizálási módszerként, öntsön több vizet az edénybe, hogy az alkatrészeket teljesen ellepje. A terméket nem szabad felügyelet nélkül hagyni a sterilizálási folyamat során. Ne forraljuk túl sokáig –maximum 10 percig. • A szoptató anyáknak, akik 2-3 óránként szoptatnak, nem javasoljuk az egyes használat utáni sterilizálást és tisztítást. A túlzott fertőtlenítés és tisztítás könnyen az alkatrészek idő előtti elöregedéséhez vezethet, és lerövidítheti a mellszívó élettartamát. Naponta egyszer ajánlott a foltok alapos tisztítása és sterilizálása. • Tárolja az alkatrészeket tiszta edényben a következő használatig. FONTOS! Ha a mellszívót tejtárolásra használja, ügyeljen a pumpa minden mosható részének fertőtlenítésére, mert ellenkező esetben a tej könnyen megromolhat, mivel nehezen tárolható termékről van szó.

FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg arról, hogy a MELLSZÍVÓház, a szelep, a dugattyú és a fedél száraz. • Ha gőzsterilizátort használ a MELLSZÍVÓ alkatrészeinek tisztításához, ügyeljen arra, hogy azok ne érintkezzenek a sterilizáló fűtőberendezésével. Ha pedig forralást használ sterilizálási módszerként, ügyeljen arra, hogy az alkatrészek ne érintkezzenek a forralni kívánt edény aljával. • Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, ajánlatos egyszer feltölteni az akkumulátort. egy hónap.

XI. HIBAEMLÉSI TÁSI ÜTMUTATÓ

Szíváshiány: • Győződjön meg arról, hogy nem takarta el vagy takarta el a MELLSZÍVÓház levegőnyílását. • Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt megfelelően szerelt-e össze, és hogy a szelep megfelelően van-e elhelyezve. • Győződjön meg arról, hogy a szilikon masszázspárna biztonságosan illeszkedik a MELLSZÍVÓ testéhez, és tökéletes tömítést hoz létre.

• Ellenőrizze, hogy a szilikon szelepet szilárdan a MELLSZÍVÓház nyílásába helyezte-e. • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült alkatrészek.

Ha nem tudja bekapcsolni a MELLSZÍVÓt, ellenőrizze, hogy az akkumulátor lemerült-e. Csatlakoztassa az adaptert a terminálhoz a motor töltéséhez. Ne használja töltés közben, mert lerövidíti az akkumulátor élettartamát 2. Nem folyik le tej: • 1. pont ellenőrzése • Győződjön meg arról, hogy a MELLSZÍVÓ megfelelően van összeszerelve és szívóerő keletkezik. • Lazítson, és próbálja újra. • Javasoljuk, hogy fokozatosan növelje a szinteket; a legalkalmasabb az a szint, amellyel a szívás fájdalommentes.

A következő NEM igaz: minél erősebb –annál jobb. A túl erős szívás károsíthatja a mellbimbót.

3. Fájdalom az emlő területén, ahol expresszió van: • Ha fájdalmat érez, és nem folyik tej a kifejezés alatt, lehet, hogy az emlőmirigye elzáródott. A teljes tej kifejezés jó hatással lesz a tögygyulladás elleni védekezésre. Lehet, hogy túl magas szívási szintet használ. Nem kell a MELLSZÍVÓ által generált összes szívóerőt felhasználnia. • Próbálja meg beállítani a megfelelő szívást és frekvenciát.

4. Túl lassú az áramlás: A tej áramlási sebessége minden nőnél eltérő. A magasabb expressziós fok és szint nem jelent gyorsabb tejfolyást. Ez sok tényezőtől függ –a mell felépítéstől, a lehetőségek szintjétől, meg a hangulattól is. • Minél rendszeresebben használja a mellszívót, annál gyorsabban és könnyebben folyik ki a tej. Mielőtt elkezdené használni, tegyen egy meleg kendőt a melleire, és használja a masszázis üzemmódot körülbelül 5 percig, mielőtt átváltana kifejezőmódra.

5. Tej folyik le a szilikon masszírozópárnán: • Vegye ki, majd helyezze vissza a masszírozópárnát, hogy biztosan rögzítse a tölcser központi részéhez. • Próbáljon kissé előre dőlni.

6. A pumpa/cumisüveg alkatrészeinek repedése és elszineződése: Kerülje az antibakteriális vagy súroló hatású mosó-/tisztítószerrel való érintkezést, mert károsíthatják a műanyagot. Mosószer, tisztítószer, sterilizáló oldat, lágyított víz és hőmérséklet-ingadozás kombinációja a műanyag megrepedését okozhatja. Ha ez előfordul, kérjük, ne használja. A pumpa teste

és az anyatejtartók mosogatógépben moshatóak, de az élelmiszer-színezékek elszíneződést okozhatnak. Tartsa távol a terméket közvetlen napfénytől, mivel a hosszan tartó expozíció elszíneződéshez vezethet.

7. Elveszett vagy törött alkatrészek: Pótalkatrészekért forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy ahhoz az értékesítési ügynökhöz, akitől a terméket vásárolta.

Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá vagy nem szállított.

Ne próbálja megjavítani vagy módosítani a terméket, mert ez veszélyeztetheti az Ön és babája egészségét.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket! Használja körültekintően, és kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat az elektromos mellszívó biztonságos használatának és karbantartásának biztosítása érdekében. Ha kérdése van a termék használatával, karbantartásával és javításával kapcsolatban, forduljon ahhoz az importőrhez vagy értékesítési ügynökhöz, akitől a terméket vásárolta.

XII. MEGFELELŐSÉG AZ EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK ÉS IRÁNYELVEKNEK

Ezt a terméket az alábbi európai irányelvek követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották: 2014/30/EU elektromágneses koherencia irányelv; 2011/65/EU irányelv és kiegészítései 2015/863/EU és 2017/2102/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról, 2011/8/EU irányelv a biszfenol használatának korlátozásáról A műanyag cumisüvegben; 10/2011/EU rendelet az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról.


A termék megfelel a következő európai szabványok követelményeinek, amelyek közül néhány harmonizált: EN55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015; EN 14350:2020.

ÖSSZETÉTEL: PP és szilikon

AD



PD

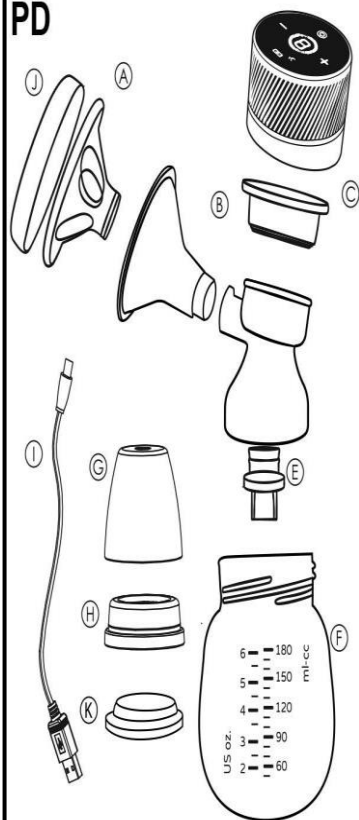

P

